

Lit MMO6000 Active MMO MEDICAL

*Aide technique
au positionnement couché
ISO 18.12.10*

MOUVEMENTS FACILITÉS

Ce lit est destiné aux personnes souhaitant moduler leurs points de pression au cours de la nuit et mobiliser notamment les membres inférieurs par l'intermédiaire des plicatures.

MATÉRIAUX

Châssis en acier, commandes en plastique et cadre de lit en bois rendent les produits à la fois robustes et design.

COMPATIBILITÉ

Le lit MMO3500 est compatible avec tous types de matelas anti-escarres à air ou à mousse, eux-mêmes compatibles avec les plicatures de lit.



Le lit MMO6000 Active de chez MMO MEDICAL permet, en position couchée, de modifier les points de pression sur l'ensemble du corps et de mobiliser en particulier les membres inférieurs.

Les mouvements spécifiques de proclive et déclive sont accompagnés des fonctionnalités habituelles d'un lit médicalisé : *lift* (réglage de la hauteur du lit), barrières de sécurité, etc. sans oublier l'innovante sortie du lit qui se fait... par les pieds, en position assise.



**Garanties :**

Électronique : 5 ans

Structure du lit : 10 ans

Dimensions (hors sur mesure) :

Plan de couchage : 200 x 90 cm

Hors tout : 214 x 99,8 cm

Poids utilisateur : 250 kg

Énergie : 220 V

Matériaux :

Châssis et barrières : acier

Cadre de lit : bois

Télécommandes : plastique


Homologation du système : CE

Fonctionnement du lit MMO6000 Active

Le lit MMO6000 Active permet à l'utilisateur de se mettre en **proclive** et **déclive** avec une amplitude de -10° à $+10^\circ$.

Les **plicatures électriques**, au nombre de trois, permettent également de mobiliser les membres inférieurs et le buste. A noter que le relève-buste est doté d'un **mouvement de translation de 23 cm** qui prévient les compressions abdominales ainsi que les phénomènes de "friction" et de "cisaillement" qui sont responsables du développement des escarres.

Enfin, le lit offre un **réglage de la hauteur du lit de 29 à 83 cm**.

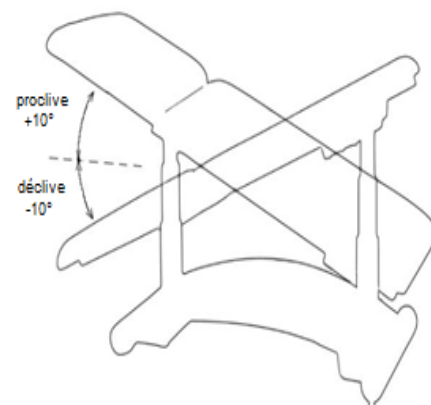

La véritable innovation du lit repose dans sa **sortie de lit** qui ne se fait pas par le côté mais bien **par les pieds**. L'utilisateur diminue ainsi ses efforts de torsions et la tierce-personne voit cette étape de transfert facilitée.



Le lit dispose d'un **appel malade** de série qui complète l'option Sentinelle : un **capteur de présence** installé sous le matelas détecte le poids de l'utilisateur. Lorsque celui-ci se lève, l'éclairage environnant s'allume et un signal d'alerte peut être envoyé. La lumière s'éteint automatiquement lorsque la personne se couche.

Une fonction d'urgence (CPR) permet de remettre à plat l'utilisateur mécaniquement ou électriquement.

MMO INTERNATIONAL propose de série, des **télécommandes filaires** et, en **option**, des télécommandes non-filaires **infra-rouge** ainsi qu'une **tablette connectée**. La tablette permet de programmer les mouvements automatiques du lit et offre également un accès internet, à la radio, à la télévision...

Les contacteurs ne sont pas disponibles.

**Options possibles avec le MMO6000 Active**

MMO MEDICAL propose les options suivantes :

- Matelas au choix : Aerospacer®, Viscoélastique, HR 35...
- Boîtier de commande Soignant
- Télécommande infrarouge sans fil
- Récepteur infrarouge
- Dossiers tête et pied au choix
- Veilleuse de nuit
- Carter de protection de roues
- Coussins de maintien
- Kit d'habillage bois ou textile
- Tablette connectée

Fabricant : MMO INTERNATIONAL**Pays de fabrication :** France**Fournisseur français :**

MMO INTERNATIONAL

24 route de Beauvais

35500 Vitré

02 99 75 04 50

Formulaire de contact :

<http://www.mmomedical.fr/contact.html>**Tarifs : livraison, installation**

2 500 € - 3 000 € HT

Tablette

1 500 € - 1 800 €

Remboursement de la Sécurité Sociale : non**Location :** non**Essais à domicile :** non**Lien vers le site :**<http://www.mmomedical.fr/>**Lien vers les produits :**<http://www.mmomedical.fr/mmo-medical/lits-de-longs-sejours/mmo-3500.html>**Rédaction :**

Cellule Innovation AFM-Téléthon

téléphone : 01 69 13 21 06

celluleinnovation@afm-telethon.fr

Association reconnue d'utilité publique

1, rue de l'Internationale - BP 59 - 91002 Évry cedex

Tél : 33 (0) 1 69 47 28 28 - Fax : 33 (0) 1 60 77 12 16

Siège social : AFM - Institut de Myologie

47 - 83, boulevard de l'Hôpital - 75651 Paris cedex 13

www.afm-telethon.fr